



# FRACTIONAL RF microneedling MACHINE



## AVANTAGES

### Deux méthodes de traitement

Il existe deux méthodes de traitement avec la pointe Dual Matrix et RF Pointe Microneedle pour répondre aux besoins des différents clients.

### Profondeur d'aiguille réglable

L'aiguille est réglable de 0,3 à 3 mm, agit sur la couche d'épiderme et la couche de derme en contrôlant la profondeur de l'aiguille par unité de 0,1 mm

### Système de tir à aiguilles

Le contrôle automatique de la sortie peut mieux répartir l'énergie RF dans le derme, afin que les patients puissent obtenir un meilleur résultat de traitement.



### cartouches d'aiguilles jetables stérilisées

## 3 TAILLE CARTOUCHES

convient à différentes zones de traitement



Aiguilles MRF-81 Aiguilles MRF-49 Aiguilles MRF-25




### Pièce à main Dual Max SRF

SRF



## Micro-aiguille Handiece

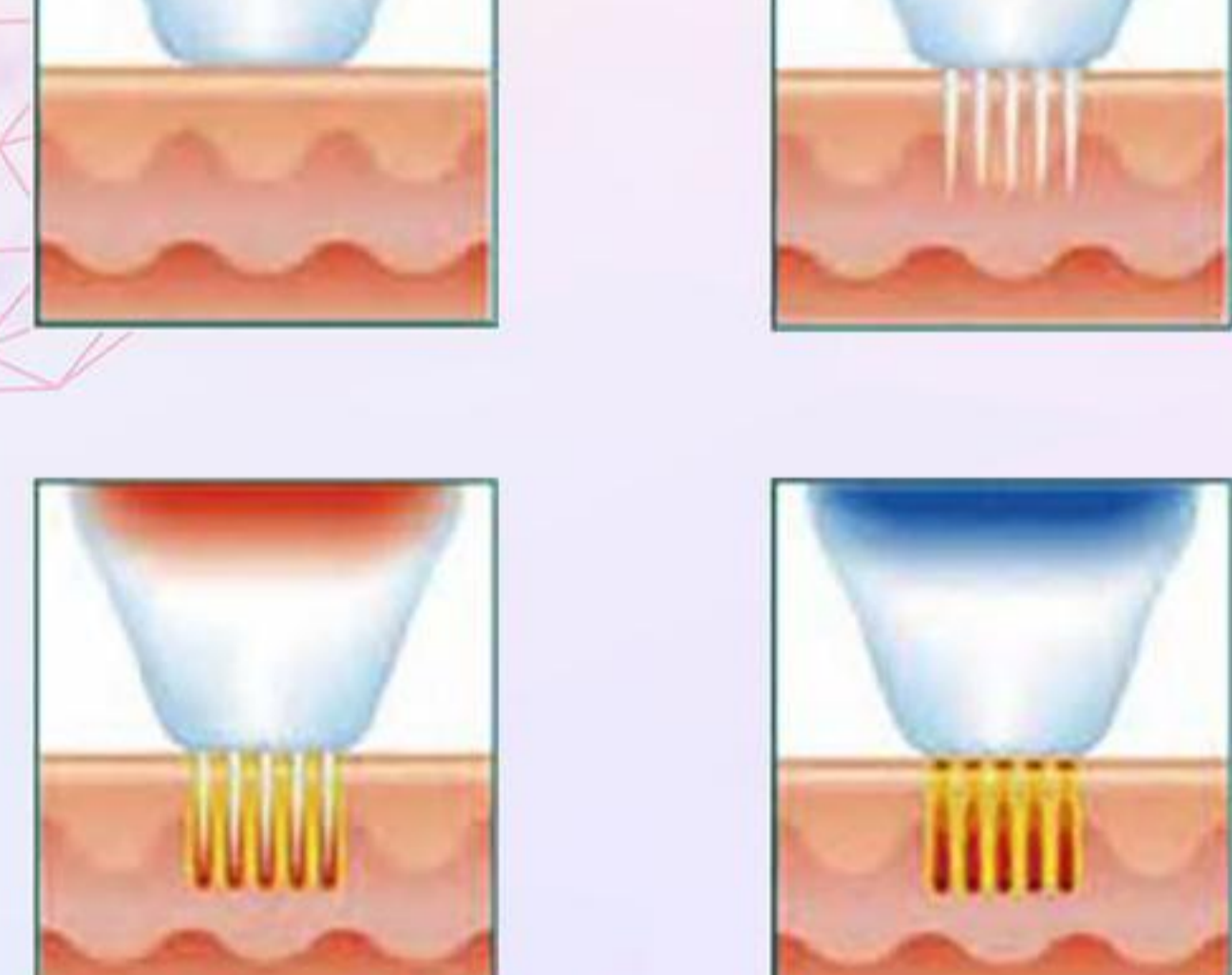


### PRINCIPE DE TRAITEMENT

En utilisant un dispositif professionnel de micro-aiguilletage à radiofréquence avec de fines aiguilles pour créer de petits pores dans la couche superficielle de la peau, il crée un effet déclencheur qui favorise la production naturelle de nouvelle élastine et de collagène. Profondément dans le derme pour augmenter l'impact du microneedling traditionnel.



### Pièce à main Dual Max SRF

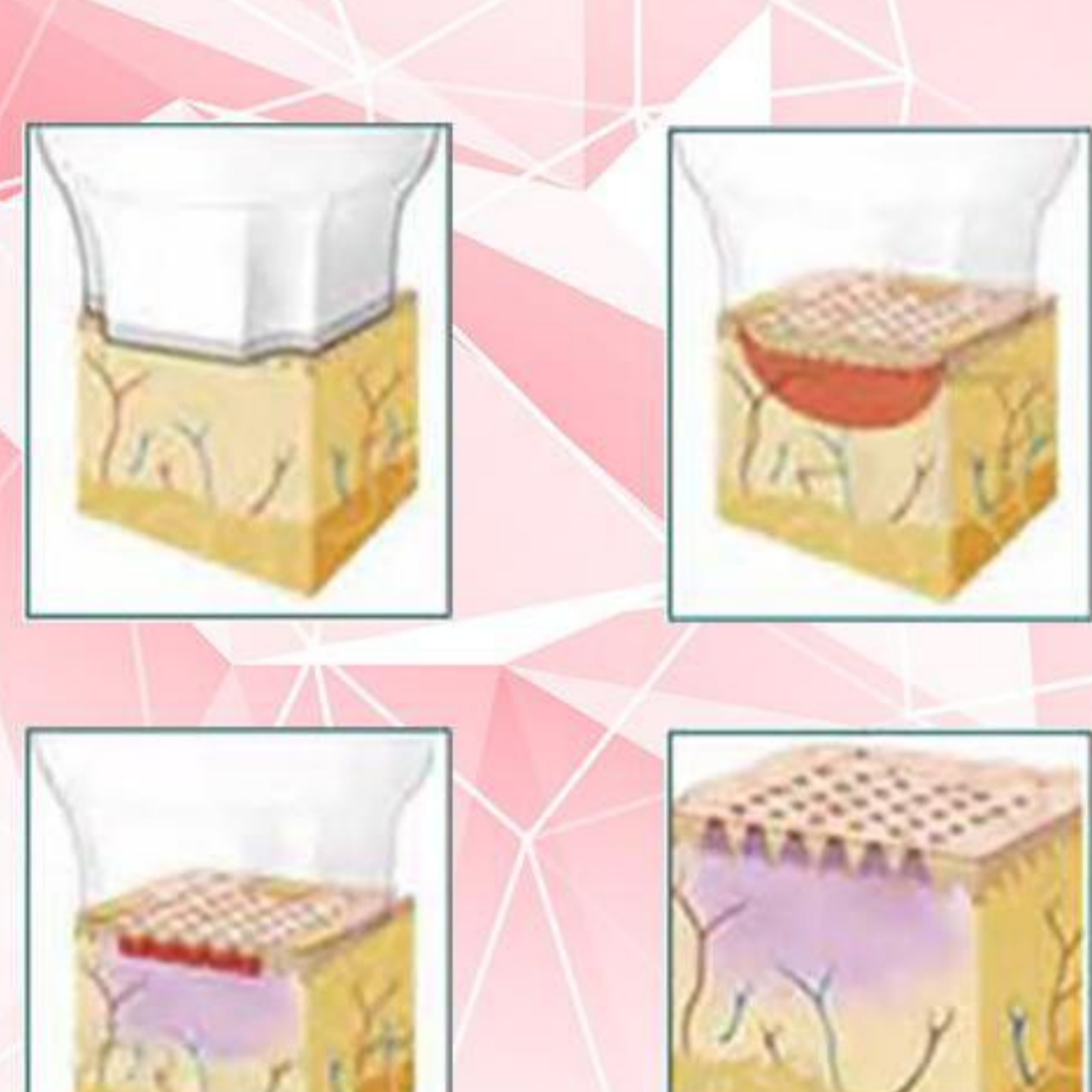

### PRINCIPE DE TRAITEMENT

La technologie d'aiguilletage à flux breveté insère en série les micro-aiguilles rangée par rangée pour une procédure plus confortable. L'insertion en série réduit les étirements non naturels afin de réduire davantage la douleur et les temps d'arrêt. La profondeur de la zone de coagulation est contrôlée avec précision. L'épiderme offrant un temps de guérison plus rapide pour vos patients. La profondeur réglable de la livraison d'énergie RF permet plusieurs passages et le traitement des zones délicates.



## PORTÉE DU TRAITEMENT

### SOIN DU VISAGE

- Lifting du visage et des yeux
- Raffermissment de la peau
- Élimination des rides
- Réduction des pores dilatés
- Traitement des cicatrices d'acné

### CORPS

- Traitement des vergetures
- Enlèvement de cicatrice
- kératose pileaire



Académie Beauty Swiss Samuelian  
Amelia samuelian  
Rue du Jura 4b  
1800 Vevey  
Suisse VD  
+41797613085

## PARAMÈTRE TECHNIQUE



- Fréquence RF: 5 MHz
- Intensité énergétique RF: 1 ~ 10 niveaux
- Du pouvoir: 80W
- Type d'aiguilles: 81 conseils, 49 cons.
- Profondeur de l'aiguille: 0,3-3 mm (réglable)
- Zone de tête MRF(cm2): 1\*1, 1.5\*1.5, 2\*2
- Zone de tête SRF: 64 broches / 2\*2 cm2
- Tension d'entrée: 110/220 V ; 50/60Hz

- 5 MHz
- 1 ~ 10 niveaux
- 80W
- 81 conseils, 49 cons.
- 0,3-3 mm (réglable)
- 1\*1, 1.5\*1.5, 2\*2
- 64 broches / 2\*2 cm2
- 110/220 V ; 50/60Hz